


BAB IV

PERANCANGAN ALAT


4.1 Gambar Alat Spektrofotometer Spectonic Genesys 20 Visible

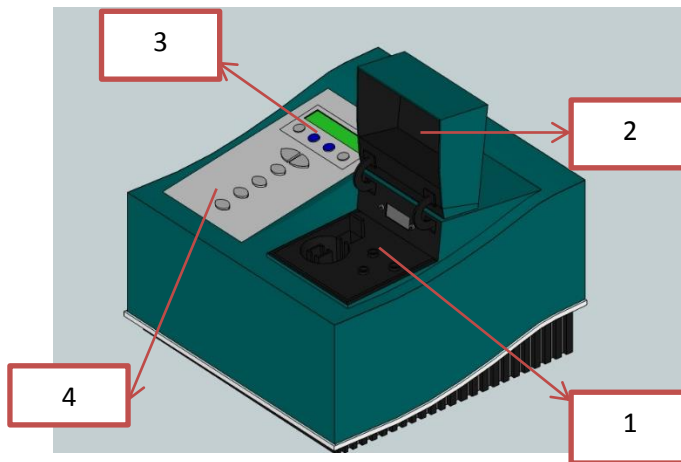

Keterangan :

1. Peletakan sampel
2. Penutup sampel
3. Keypad fungsional
4. LCD digital

Gambar 4 . Tampak depan perancangan alat spektrofotometer

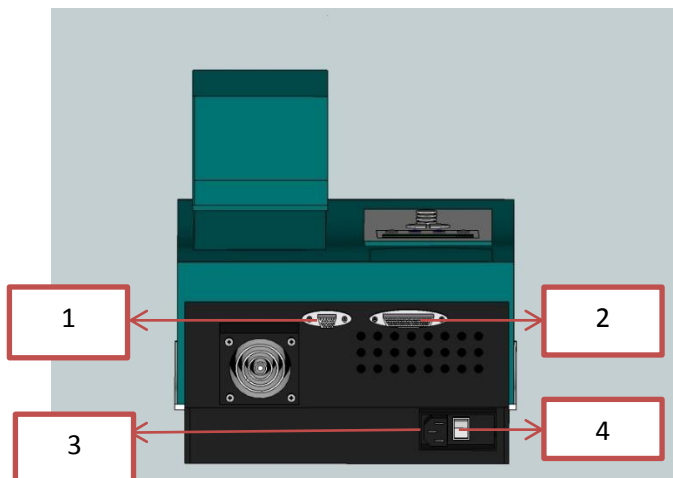

Keterangan :

1. Port Serial
2. Port Printer
3. Power Connector
4. Tombol On/Off

Gambar 5 . Tampak belakang rancangan alat spektrofotometer

4.2 Spesifikasi Alat Spektrofotometer Spectonic Genesisys 20 Visible

Optical Design	Single Beam
Spectral Bandwidth	Less than or equal to 8 nm
Light Source	Tungsten - Halogen (typical service life of 1000 hours)
Detector	Silicon Photodiode
Wavelength	325 - 1100nm (+/-2.0 nm)
Display	20-character, 2 – line LCD
Power	Selected automatically; 100-240 Volts
Dimensions	12"W x 13"D x 7"H
Weight	10lbs.
Merk	USA
Product Type	Spectrophotometer Visible

4.3 Cara Kerja Spektrofotometer Spectonic Genesis 20 Visible

1. Persiapkan seluruh alat dan bahan kemudian dibersihkan
2. Hidupkan alat selama 20 menit sebagai fungsi pemanasan
3. Pilih mode % transmitansi dengan menekan tombol MODE
4. Mengatur panjang gelombang berdasarkan warna dari sampel yang akan dianalisa
5. Sebagai blanko, masukkan air suling ke dalam kuvet (terlebih dahulu dicuci dengan air dan bersihkan kuvet dengan menggunakan tisu), kemudian masukkan kuvet ke dalam alat spektrofotometer
6. Menekan tombol T100% / 0-Abs sampai layar terbaca T 100% atau 0,000A
7. Ulangi percobaan 3 sampai 6 untuk sampel yang berbeda.