


BAB IV

PERANCANGAN ALAT

4.1 Spesifikasi Alat

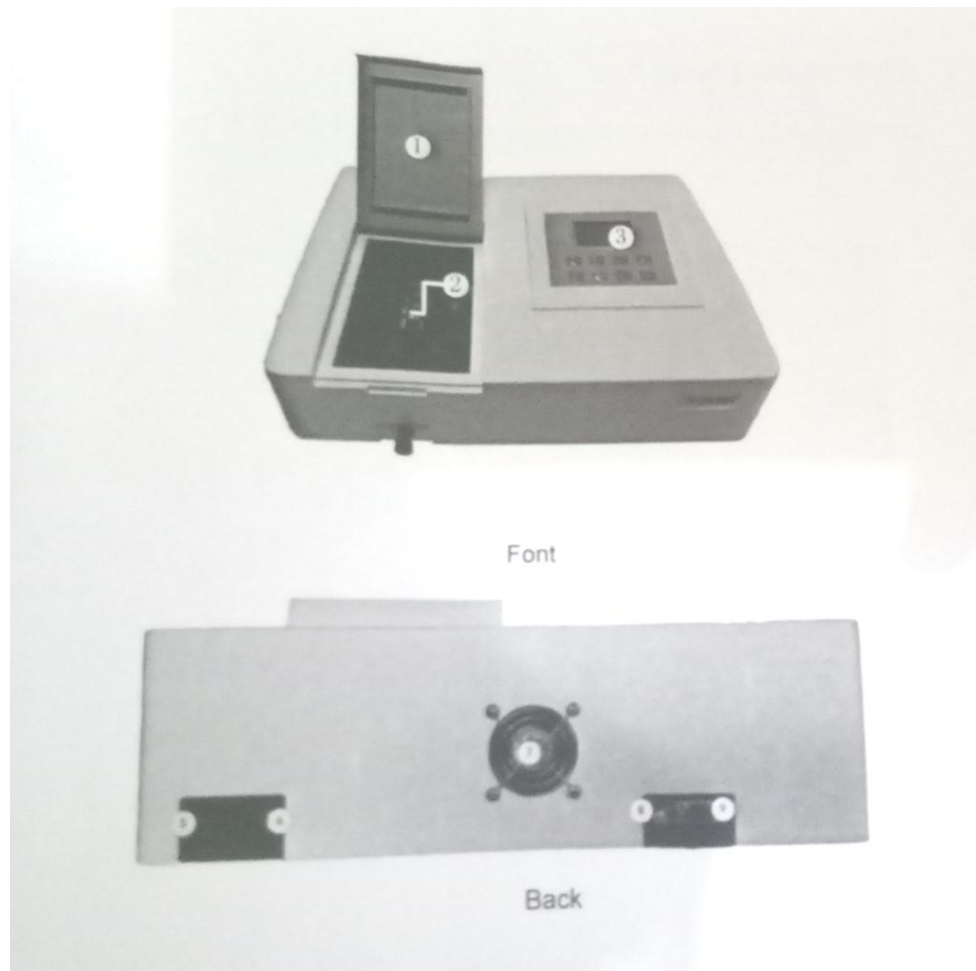

Gambar 3. Bagian – bagian *Spektrofotometri Visible*

Keterangan Gambar:

1. Lid of the room
2. Cell Holder
3. Operation Panel terdiri dari : *LCD Displayer dan Keypad*

→ Keypad Description :

- a. *Set* untuk Setup
 - b. *Print* untuk Print
 - c. *Clear* untuk Clear
 - d. *Up, down key* untuk mengganti mode test, serta untuk menambah atau mengurangi panjang gelombang
 - e. *GOTO λ* untuk Panjang Gelombang
 - f. *Zero* untuk Mengkalibrasi nol
 - g. *Enter* untuk Mengkonfirmasi
 - h. *Return* untuk Mengulang
4. Rod
 5. Power Switch
 6. Power Socket
 7. Fan
 8. USB Port
 9. Print Port


Tabel 1. Spesifikasi Alat

Optical System	Singke Beam, Greeting 1200lines/mm
Wavelength Range	325-1000 nm
Spectral Bandwidth	4nm
Wavelength Accuracy	$\pm 1.8\text{nm}$
Wavelength Repeatability	$\leq 0.5\text{nm}$
Photometric Accuracy	$\pm 0.002\text{A}$ (0-0.5Abs), $\pm 0.004\text{A}$ (0.5-1.0Abs), $\pm 0.5\%$ T (0-100% T)
Photometric Repeatability	0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs), $\leq 0.2\%$ T (0-100% T)
Stray Light	$\leq 0.1\%$ T @360nm; 220nm
Stability	± 0.001 A/h @500nm
Noise	$\pm 0.001\text{A}$
Display	128*64 Dots LCD
Photometric Mode	T, A, C, E
Photometric Range	0-200% T, -0.301-3.0 A
Detector	Silicon Photodiode
Light Source	Deuterium Lamp, Tungsten Lamp
Input	Membrane Keypad
Standart Acceseries	10mm glass cuvette*4 units
Power Supply	110/220V $\pm 10\%$, 60/50Hz
Packing Size(W*D*H) mm	580*430*320
Gross Weight(kg)	11.5

4.2 Operasi Alat

1. Sistem Perangkat Lunak

Alat terdiri atas 4 cara: cara A, cara T, cara C dan cara F.

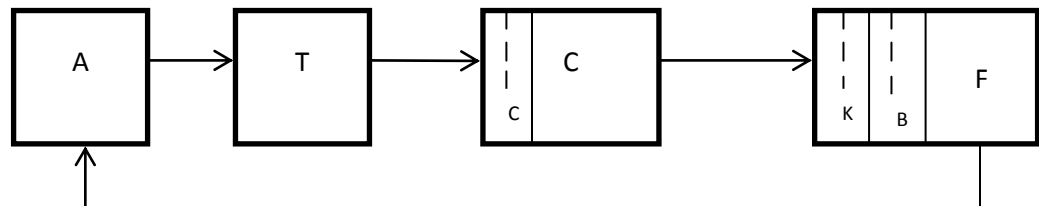

Gambar 4. Sistem Perangkat Lunak

2. Operasi Dasar

a. Pilih Metode Uji

Tekan atas, bawah tombol untuk mengubah mode uji

b. Mengatur Panjang Gelombang

Tekan GOTO λ untuk mengatur panjang gelombang, panjang gelombang dapat disesuaikan dengan tombol atas dan bawah, nilai panjang gelombang akan ditampilkan pada layar.

c. Mengatur Parameter

Alat akan memberi petunjuk untuk memasukkan konsentrasi atau k, b yang dapat berubah dengan tombol atas dan bawah, tekan ENTER untuk konfirmasi dan menyimpan nilai

d. Mengkalibrasi Nol

Tekan ZERO untuk dapat mengkalibrasi nol.

e. Mengkalibrasi 100%T

Letakkan referensi di jalur terang, tekan ZERO untuk mengkalibrasi 100%T/0Abs.

f. Mencetak Hasil Uji

Pada uji antarmuka, tekan PRINT untuk mencetak hasil uji.

3. Sebelum Pengukuran

a. Pengecekan

Hapus semua blok di jalan yang terang dan tutup kompartemennya

b. Sebelum Pemanasan

Setelah pengecekan, alat akan dilakukan keadaan sebelum pemanasan.

Untuk uji yang akurat, paling sedikit diperlukan pemanasan selama 30 menit


c. Cek Kuvet

Kuvet harus bersih dan tidak ada sampel yang berada diatas permukaannya.

4. Perlakuan

a. Uji Absorbansi

1) Pilih "A" dengan tombol atas dan bawah (Gambar 4-1)

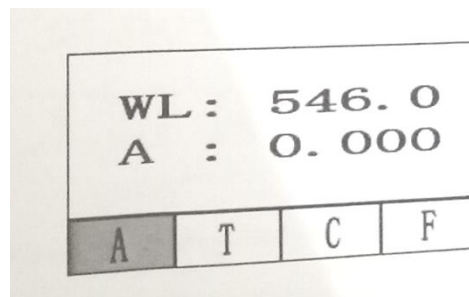


Gambar. 4-1

2) Tekan **GOTO λ** , tombol atas dan bawah untuk memilih panjang gelombang yang dibutuhkan, masukkan untuk konfirmasi.

3) Letakkan refraince di jalur cahaya dan tekan nol untuk mengkalibrasi 100% T / 0 abs

- 4) Pengukuran sampel, letakkan sampel yang akan diukur di jalur cahaya, kemudian hasilnya ditampilkan di layar secara otomatis (Gambar 4-2)

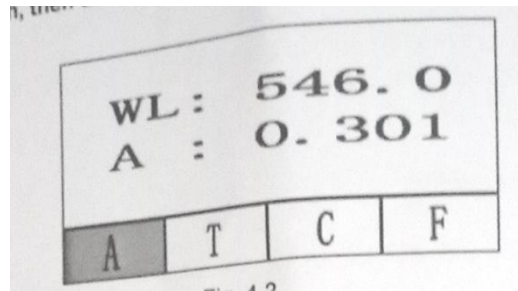


Gambar. 4-2

- 5) Tekan **PRINT** untuk mencetak hasil tes.
6) Ulangi langkah 4,5 untuk menguji sampel lainnya

b. Uji Transmittansi

- 1) Pilih "T" dengan tombol atas dan bawah (Gambar 4-3)

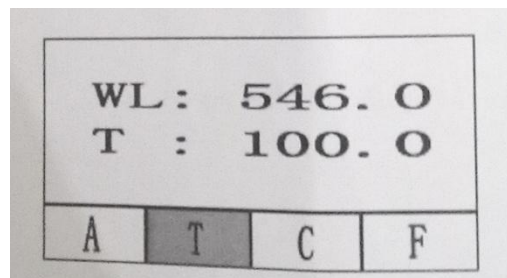

Gambar. 4-3

- 2) Tekan pergi **GO TO λ** tombol atas dan bawah untuk memilih panjang gelombang yang Anda butuhkan, masukkan untuk konfirmasi.
3) Letakkan referensi di jalur cahaya dan tekan nol untuk mengkalibrasi 100%T/0 abs.

- 4) Pengukuran sampel, letakkan sampel yang akan diukur di jalur cahaya, kemudian hasilnya ditampilkan di layar secara otomatis (Gambar 4-3)
- 5) Tekan **PRINT** untuk print hasil uji.
- 6) Ulangi langkah 4-5 untuk uji sample lain.

c. Uji Konsentrasi Ketika Konsentrasi Standart Sample Diketahui

- 1) Masukkan mode "C", mempersiapkan uji panjang gelombang
- 2) Tekan **SET**, letakkan referensi di jalur terang, tekan **ZERO** (Gambar 4-5)
- 3) Masukkan Conc. Mengikuti panduan, sesuaikan bawah dan atas diikuti **ENTER** untuk konfirmasi.
- 4) Letakkan sampel standar di jalur terang mengikuti panduan, **ENTER** untuk konfirmasi.

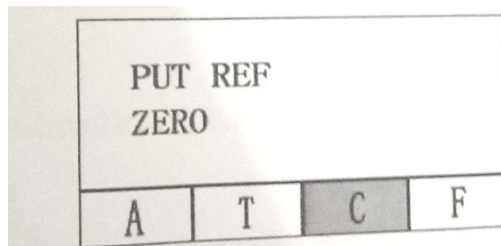


Fig. 4-5



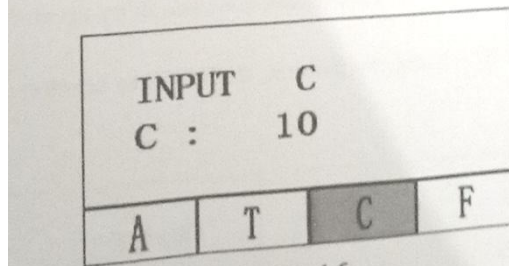


Fig. 4-6

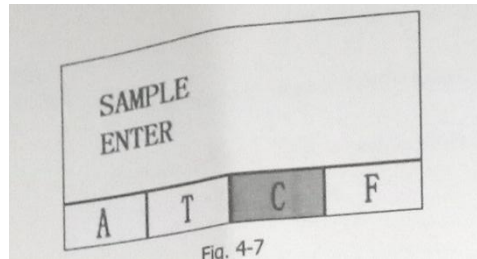

Gambar. 4-7

- 5) Letakan "Sampel" di jalur terang, baca hasil conc

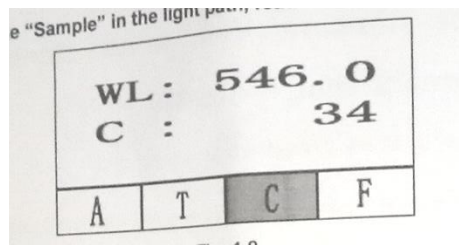


Gambar. 4-8

- 6) Tekan **PRINT** untuk mencetak hasil uji.
7) Ulangi langkah 5,6 dengan sample yang lain.


d. Uji Konsentrasi Saat Kurva Standart Diketahui

- 1) Pilih mode "F" dengan tombol atas dan bawah.
- 2) Tekan **GOTO λ** , masukan panjang gelombang uji dengan tombol atas dan bawah.
- 3) Tekan SET, masukan nilai K, B, **ENTER** untuk konfirmasi. (Gambar. 4-9)

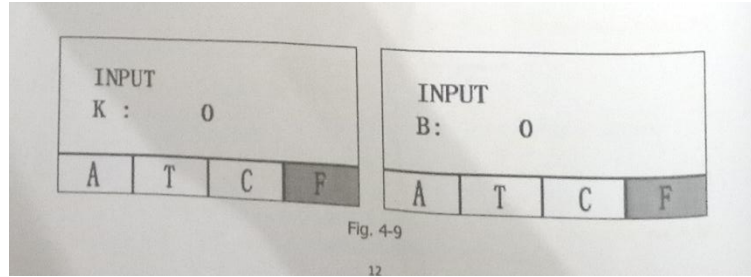

Gambar.4-9

- 4) Letakkan "referensi" di jalur cahaya, **ZERO** dapat mengkalibrasi nol.
- 5) Letakkan "sampel" di jalur yang terang, baca nilai konsentrasi. (Gambar 4-10)

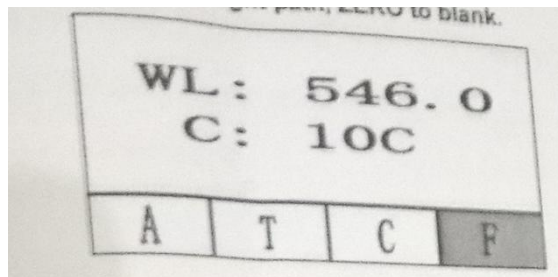

Gambar. 4-10

- 6) Tekan **PRINT** untuk mencetak hasilnya.
- 7) Lakukan langkah 5, 6 untuk menguji sampel lainnya.